


# BARRIER® EasyWarm®

Aktivt selvvarmende  
teppe til engangsbruk

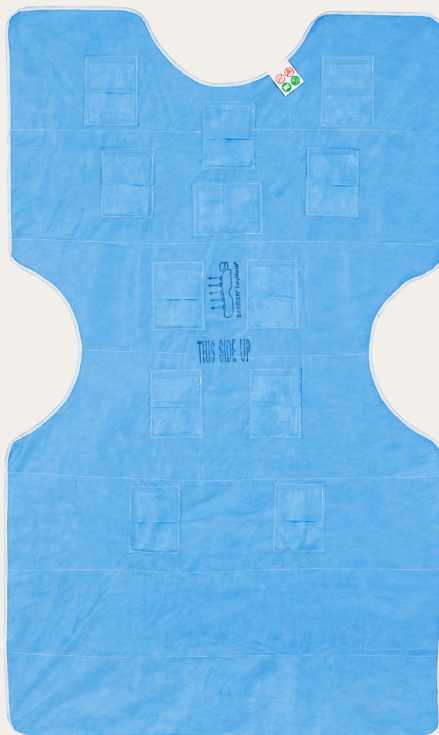

Barrier® EasyWarm® teppet når brukstemperatur innen 30 minutter, og opprettholder en gjennomsnittstemperatur i opptil 10 timer.

- Bruk før, under og etter operasjon for effektiv forebygging av hypotermi
- Teppet begynner å varmes med en gang det tas ut av emballasjen
- Fungerer uten tilleggsutstyr eller strømtilkobling
- Støyfri, og ingen forstyrrelse av luftstrømmen i operasjonsstua

# Bruksanvisning

Skann QR-koden for  
bruksanvisning



1. Riv opp pakken ved hjelp av fliken i øvre venstre hjørne. Ta teppet ut av emballasjen slik at BARRIER® EasyWarm® eksponeres for luft og dermed starter varmeprosessen.



2. Åpne og fold helt ut BARRIER® EasyWarm®, unngå å legge teppet dobbelt. Når teppet eksponeres for luft når det gjennomsnittlig brukstemperatur innen 30 minutter, som opprettholdes i opptil 10 timer.



3. Plasser BARRIER® EasyWarm® med varmeputene opp. Det skal ikke legges ekstra vekt på varmeputene.



4. Under den pre- og postoperative periode, og under kirurgiske inngrep i hender, armer og hode, plasseres BARRIER® EasyWarm® over hele kroppen.



5. Ved kirurgiske inngrep i nedre del av abdomen eller underekstremiteter legges BARRIER® EasyWarm® på overkropp og overekstremitetene, med utskjæringen i teppet i hodehøyde.



6. Ved kirurgiske inngrep i øvre del av kroppen legges BARRIER® EasyWarm® over nedre del av kroppen.

## Generell informasjon

- Skal håndteres under tilsyn av helsepersonell.
- Legges på med varmeputene vendt opp. Korrekt side er merket "THIS SIDE UP" på teppet.
- Teppet må ikke legges dobbelt.
- Unngå å legge ekstra vekt, inkludert medisinsk utstyr, eller press på teppet. Pasientens hender, armer og ben bør ikke plasseres oppå teppet under anestesi
- Overvåk kontinuerlig hudreaksjoner i henhold til klinisk praksis.
- Skal kun brukes på voksne pasienter.

## Forholdsregler

- Teppet skal ikke brukes på pasienter med alvorlig nedsatt perifersirkulasjon (inkludert huden).
- Teppet må ikke brukes i et oksygenrikt miljø, som trykkammerbehandling. Varmeputene skal ikke komme i kontakt med oksygenbasert behandling eller apparater.
- Varmeputene er magnetiske og ikke strålegjennomtrengelige, teppet skal derfor fjernes fra pasienten ved røntgen eller MR, for å unngå forstyrrelser med annet medisinsk utstyr.
- Varmen som genereres fra teppet kan føre til økt medikament tilførsel fra transdermalt terapeutisk system (depotplaster).

Art. nr.	Beskrivelse	Material	Emballasje	Kartong
629900	12 luftaktiverte varmeputer (13 cm × 10 cm) integrert i lommer i det øvre laget. Teppets mål er 152 cm × 92 cm.	Flere lag SMS (polypropylen). Lagene og lommene er sydd sammen med polyester/ bomullstråd. Varmeputene er laget av luftgjennomtrengelige poser som inneholder aktivt kull, leire, salt, vann og jernpulver.	Vakuumpakket i en polymerpose. Polymerposene er pakket i bobleplast og transportkartong.	10 stk

Les mer på [molnlycke.no](http://molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.  
Mölnlycke, BARRIER og EasyWarm varemerke, navn og logo er registrert globalt til ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2024 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOSU2712411

  
**Mölnlycke®**