
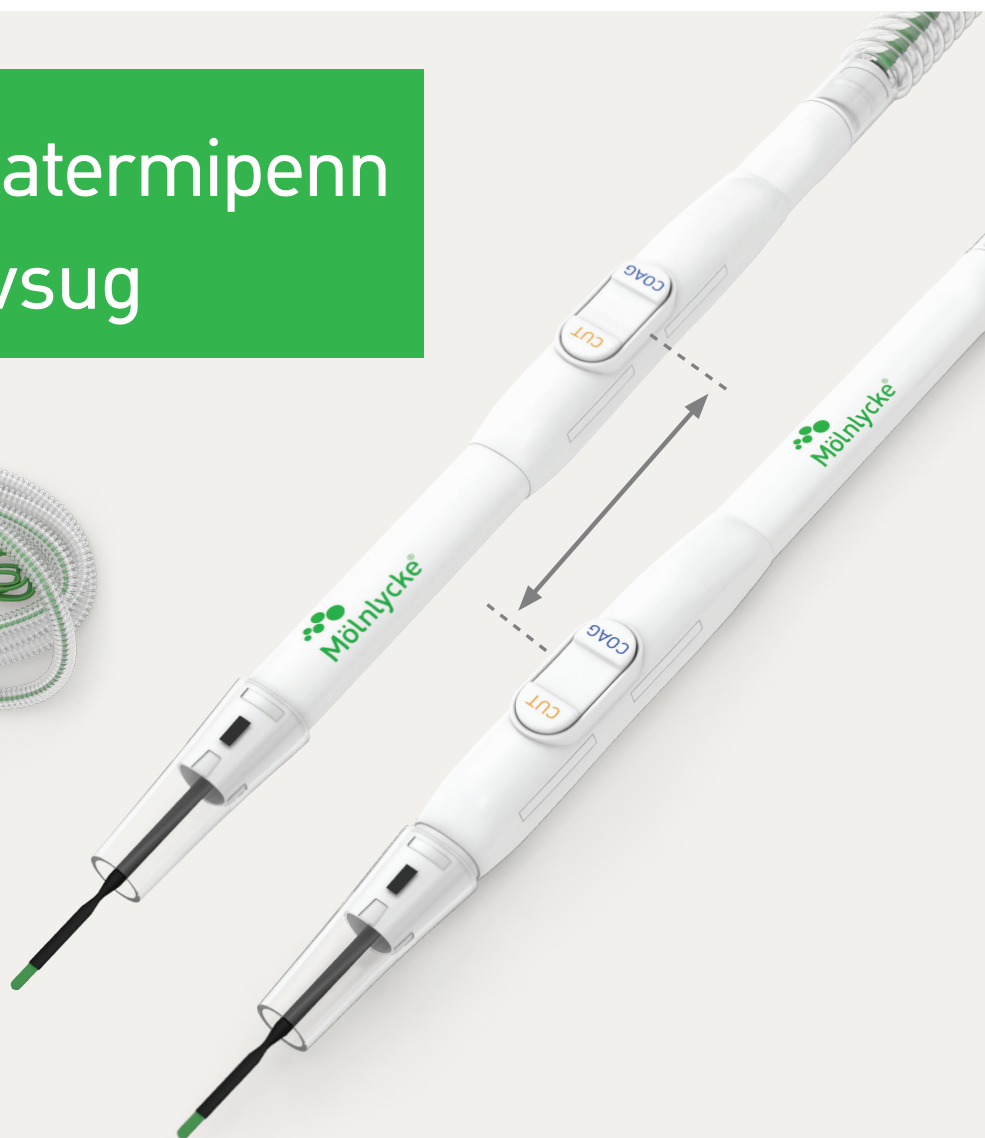


Kirurgisk diatermipenn med røykavsug

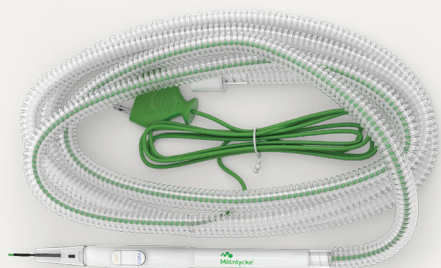

Operasjonspersonalet er utsatt for risiko hver gang kirurgisk røyk oppstår på operasjonsstua. Løsningen er den nye unike Mölnlycke® diatermipenn med røykavsug, en super løsning som sikrer minimal eksponering og «klar sikt» i operasjonsfeltet. Din og pasientens sikkerhet settes først.

- En unik og lett alt-i-ett, smal design med en integrert teleskopfunksjon, som gir en umiddelbar løsning for både dype og overflatiske snitt, ved behov.
- Mölnlycke diatermipenn med røykavsug er en bærekraftig løsning, uten DEHP og PVC.
- Veldig høy sugekapasitet (85 l/min) som minimerer eksponering av røyk og gir en rask og god sikt til/av operasjonsfeltet.
- Tilgjengelig både i tilpassede prosedyrepakker og sterilt enkeltpakket.

Tekniske data

Valg av elektroder:

Rustfritt stål ① for korte og enkle inngrep

Teflonbelagt ② som gir redusert risiko for operasjonsavbrudd på grunn av at vev fester seg til elektroden

Isolert og teflonbelagt ③ for redusert risiko for utilsiktet vevsskade ved bruk på trange steder

- 360 graders roterbart håndtak gir god bevegelse og reduserer belastningen på håndleddet
- Universal 22 mm kobling som passer alle røykavsugsmaskiner



- Lav diameter sikrer presisjon og god sikt, spesielt ved trange forhold
- Praktisk 4 m ledning

Artikkelnummer til bruk som komponent i ProcedurePak®

Art. nr.	Beskrivelse
2325334-00	Diatermipenn med røykavsug, teflon
2325352-00	Diatermipenn med røykavsug, isolert teflon
2325353-00	Diatermipenn med røykavsug, rustfritt stål

Prima Medical er den legale produsenten av diatermipennen.

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.
Mölnlyckes varemerker, navn og logo er registrert globalt til ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care gruppen.
©2023 Mölnlycke Health Care AS. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU1992311