

Sitter på

Optimal føyelighet




Mepilex® Border Flex
Mepilex® Border Flex Lite


Mölnlycke®

Sår skal heles. Pasienter trenger behandling. Sykepleiere trenger tid. Budsjettene er stramme. Utfordringen er å finne en bandasje som er behagelig og sitter på så lenge som det er behov for.

Dette er Mepilex® Border Flex-familien


Vår neste generasjon fleksible bandasjer er utviklet for å sitte på lenger og har unik føyelighet, slik at sykepleierne får bedre tid, lederne sparer penger og pasientene får økt livskvalitet.

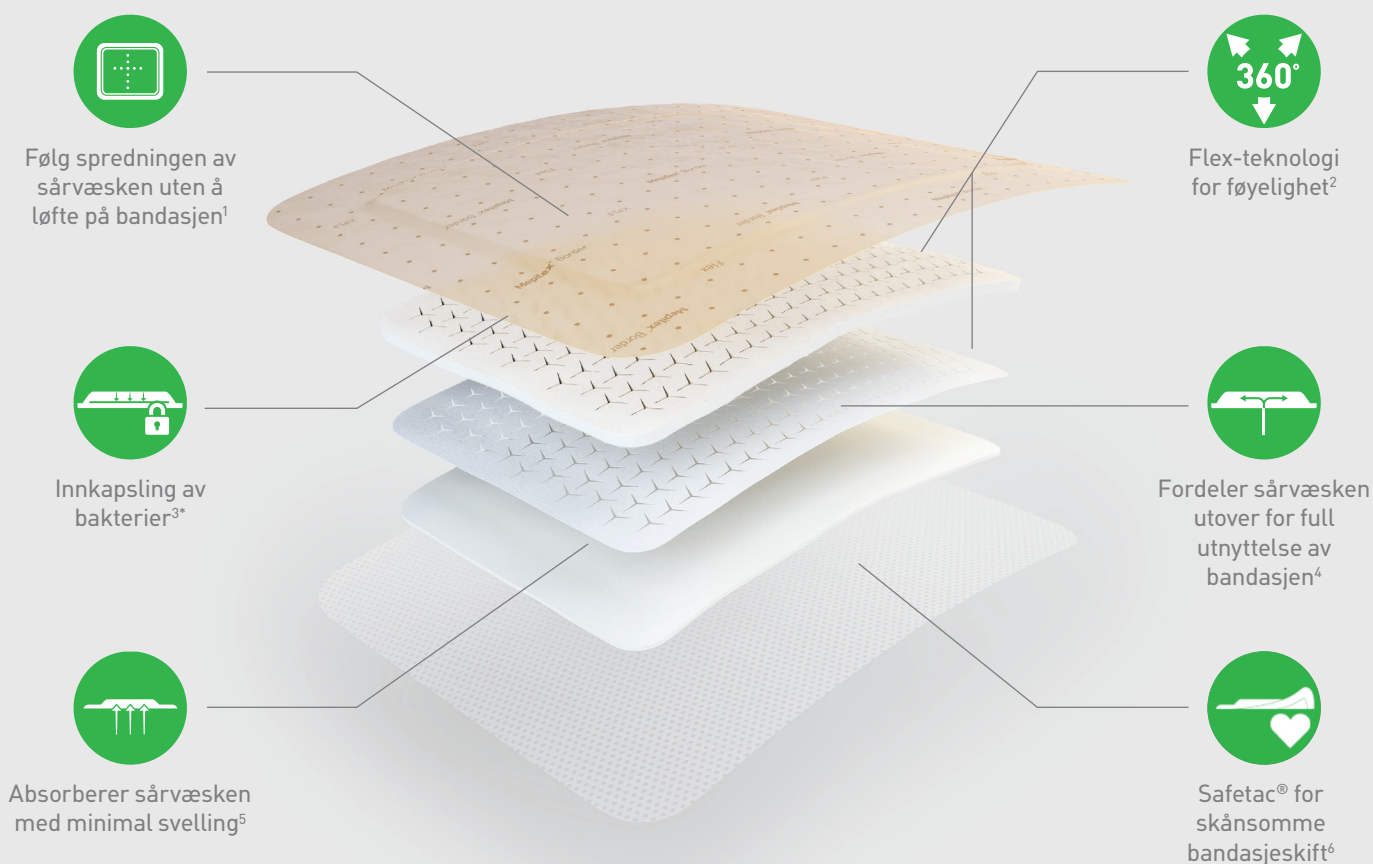

*Gjelder ikke Mepilex Border Flex Lite


Mepilex® Border Flex

Fem-lags skumbandasje utviklet for et bredt spekter av væskende sår, som legg- og fotsår, traumatisk sår (f.eks. hudflenger) og kirurgiske sår samt som del av en profylaktisk behandling for å forhindre hudskade, f.eks. trykksår.

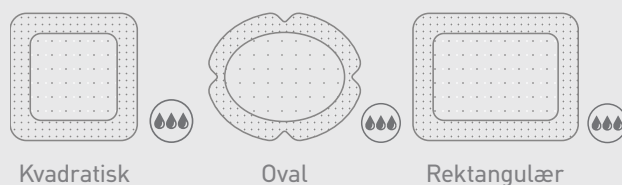

Mepilex® Border Flex Lite

Mepilex Border Flex Lite, fire-lags bandasje med Flex-teknologi for ikke- til moderat væskende sår. Finnes også i små størrelser.

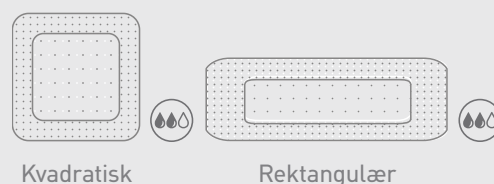

Opptil 1/3 av pasienter klager over at bandasjen deres må skiftes daglig⁷.

Intelligent væskehåndtering

Gir deg trygghet i at du kan la bandasjen sitte lenger på og fortsatt opprettholde et optimalt miljø for sårheling.



1. Rask absorpsjon med minimal svelling

Skumlaget absorberer raskt både normal og tyktflytende sårvæske^{11,12} og den håndterer sårvæske bedre enn sammenlignbare bandasjer¹⁰.



2. Maksimerer kapasiteten ved å transportere sårvæske

Sårvæsken transporteres vekk fra såret og fordeles over hele bandasjeplaten for å øke fordampning og redusere svelling^{4,5}.



3. Innkapsler og holder bakterier vekk fra såret

De superabsorberende fibre i retensjonslaget hindrer bakteriell sårvæske å trenge tilbake til såret, selv under kompresjon^{3*}, samtidig som baksidofilmen forhindrer ytre kontaminering^{13**}.



4. Overvåking av sårvæsken uten å fjerne bandasjen

Med væskeindikatorsystemet kan du overvåke og registrere spredningen av sårvæsken uten å forstyrre sårhelingen¹.

**MEPILEX BORDER FLEX
HAR SÅ MYE SOM**

2,2x

bedre væskehåndtering sammenlignet med andre skumbandasjer med heftkant som er testet¹⁰

* Gjelder ikke Mepilex Border Flex Lite

**partikler / mikroorganismer større enn 25 nm


Slik fungerer sårvæskeindikatorsystemet

Sårhelingen blir bedre når såret får være mest mulig i fred.

Sårvæskeindikatorsystemet gjør deg trygg på at du kan la bandasjen sitte på lenger¹.




Sårvæskeovervåkingen er et nett med ekvidistante prikker.

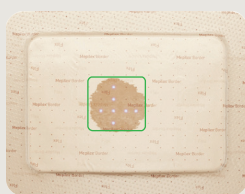


Eksempel 4 x 4 cm

Når sårvæsken spres kan du notere antall prikker som gjenspeiler væskevolumet i bandasjen.

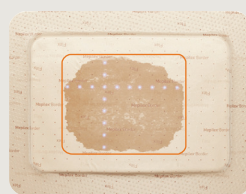

Eksempel 8 x 10 cm

Du kan følge utviklingen ved å notere antall prikker sårvæsken dekker.

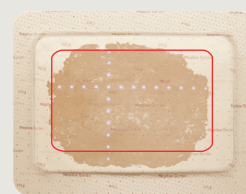

Eksempel 10 x 14 cm

Vurder å skifte bandasjen når sårvæsken nærmer seg kantene av bandasjen.^{***}

^{***} Hyppigheten av inspeksjon av såret og bandasjeskift er basert på klinisk avgjørelse og skal skje etter behandlende leges vurdering.

9 av 10 pasienter føler at såret påvirker livskvaliteten deres⁷.


Redusert smerte og skade på huden

Formålet med alle Mepilex® Border Flex-bandasjer er å redusere skader forårsaket av bandasjeskift. Det er mulig takket være Safetac®, det myke sårkontaktlaget i silikon, som **minimerer smerte og skade på huden og risikoen for maserasjon**, sammenlignet med tradisjonelle (heftende) bandasjer^{6,14,15}.


MER ENN

9/10

pasienter foretrekker bandasjer med Safetac® fremfor andre bandasjer med tradisjonelle heftemidler⁶

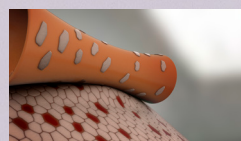

Bandasjer med tradisjonell hefting stripper huden

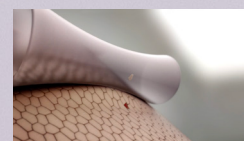

Safetac® minimerer stripping av huden

Mer enn halvparten (58 %) av pasientene klager over at bandasjen drar i huden eller ikke beveger seg med kroppen deres⁷.


Utviklet for å forme seg etter kroppen og sitte på

Takket være Flex-teknologien, har Mepilex® Border Flex en unik føyelighet som gjør at bandasjen former seg etter kroppen og følger dens bevegelser². Ved å redusere trykket på huden og belastningen på bandasjekantene, økes komforten, og risikoen for at bandasjen løsner minimeres⁸. **I tillegg er den vannavvisende så brukerne kan dusje⁹.**



Unik Flex-teknologi = 360° fleksibilitet

Y-kuttene utvides ved bevegelse:

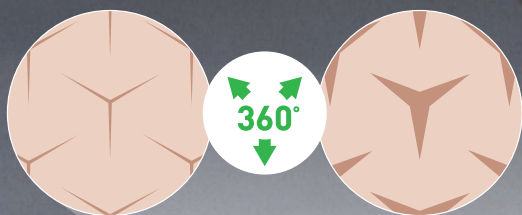

Mepilex Border Flex er så mye som

OPPTIL **11x**

mer fleksibel enn andre testede skumbandasjer².



Mepilex® Border Flex kan ha en positiv innvirkning på budsjettet ditt


På grunn av den endrede brukstiden for Mepilex Border Flex, kunne et amerikansk sykehus endre protokollen og redusere antall bandasjeskift og dokumenterte kostnader, i tillegg til å redusere behandlingstiden^{16,17}.

Les mer: <https://www.molnlycke.no/tidforforandring/>




Vi har gjort det enklere å velge riktig produkt ved å legge til en **QR-kode** på eskene og enhetspakningene våre. Koden gir deg rask tilgang til produktspesifikk tilleggsinformasjon på norsk, som brukerveiledning, appliseringsvideoer med mer.

Enkel tilgang til produktspesifikk informasjon og støtte

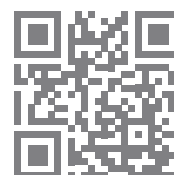

my.molnlycke.no

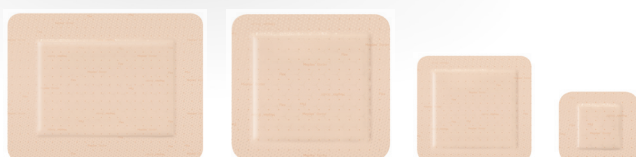

Mepilex Border Flex



Mepilex Border Flex Oval

Art.nr.	Størrelse i cm	Størrelse sårpute i cm	Antall i eske/kartong
595200	7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	5/50
595300	10 x 10	6,5 x 6,5	5/50
595000	12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	5/50
595400	15 x 15	11 x 11	5/50
595600	15 x 20	11 x 16	5/50
595800	10 x 20	5 x 15	10/30
595850	10 x 25	5 x 20	10/30
595900	10 x 30	5 x 25	10/40

Art.nr.	Størrelse i cm	Størrelse sårpute i cm	Antall i eske/kartong
583500	7,8 x 10	3,5 x 5,5	5/50
583300	13 x 16	9 x 12	5/35
583400	15 x 19	11 x 15	5/45



Mepilex Border Flex Lite

Art.nr.	Størrelse i cm	Størrelse sårpute i cm	Antall i eske/kartong
581011	4 x 5	2 x 3	10/70
581100	5 x 12,5	2,5 x 8,5	5/65
581200	7,5 x 7,5	4,5 x 4,5	5/70
581300	10 x 10	6,5 x 6,5	5/50
581500	15 x 15	11 x 11	5/50

Referanser: 1. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Estimate of spreading area using dot pattern on backing film. Report no. PD-528872. Data on file. 2. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Conformability PD-528870. Data on file. 3. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex-Bacteria encapsulation. Report no. PD-537072. Data on file. 4. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex Product Manual – Spreading layer PD-528874. Data on file. 5. Mölnlycke Health Care. Product Manual – Maintained dressing profile. Report no. 525458. Data on file. 6. White, R. A multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008;4(1):14-22. 7. Opinion Matters' 'Professional Health Care Treatment for Wounds' survey conducted June-July 2018 in UK. Data on file. 8. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – External data – FEM simulations MxB Flex vs Alleyn Life. Report no. PD-529747. Data on file. 9. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Waterproofness. Report no. PD-532095. Data on file. 10. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Fluid handling capacity compared to Urgotul Foam Absorb Border, Aquacel Foam, Alleyn Classic Gentle Border, Alleyn Life, Optifoam Gentle, KerraFoam Gentle Border. Report no. PD-527642. Data on file. 11. Mölnlycke Health Care. Mepilex® Border Flex – Absorption and dispersion tests on inclined plane, viscous test solution. Report no. PD-528871. Data on file. 12. Mölnlycke Health Care. Product manual Initial abs different test solutions. Report no. PD-535352. Data on file. 13. Mölnlycke Health Care. Product Manual Mepilex® Border Flex – Viral penetration. Report no. PD-535090. Data on file. 14. Woo, K., Coutts, P.M., Price, P., Harding, K., Sibbald, R.G. A randomised crossover investigation of pain at dressing change comparing foam dressings Advances in Skin and Wound Care 2009;22(7):304-310. 15. Meaume S. et al. A study to compare a new self-adherent soft silicone dressing with a self-adherent polymer dressing in stage II pressure ulcers. Ostomy Wound Management, 2003. 16. Nelson, D. A New Bordered Foam Dressing Technology Improves Wound Outcomes and Satisfaction While Reducing Dressing Utilization in Acute Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019. 17. Tyson, L. Study First: Driving the Case for Improving Hospital Wound Care. Poster Presentation at WOCN Annual Meeting, Nashville, 2019.

Les mer på www.molnlycke.no

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229 Etterstad, 0603 Oslo. Besøksadresse: Brynsalléen 4, 0667 Oslo. Tlf. +47 22 70 63 70. The Mölnlycke, Mepilex and Safetac trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care Group of Companies. ©2023 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. NOWC2332301