

## Diatermipenn med integrert røykavsug

Med integrert teleskopfunksjon som gir en lett tilgjengelig løsning til både dype og overflatiske inngrep, alt etter behov



Hver gang kirurgisk røyk oppstår på operasjonsstua, blir operasjonspersonell utsatt for en risiko. Du har løsningen i hånden, den nye, unike Mölnlycke® diatermipennen med røykavsug. En fremragende løsning som sikrer minimal røykeksponering og rask visualisering av operasjonsfeltet.

- En unik alt-i-ett lettvektsdesign, smalt design med en integrert teleskopfunksjon som gir en umiddelbar løsning til både dype og overflatiske inngrep.
- Mölnlycke diatermipenn med røykavsug tilbyr en bærekraftig løsning, DEPH og PVC fri.
- Meget høy sugekapasitet (95 l/min) hvilket minimerer røykeksponeringen og gir rask visualisering av operasjonsfeltet.
- Tilgjengelig både i kundetilpassede prosedyrepakker og steril enkeltpakket.


# Teknisk data

Valg av elektroder:

Rustfritt stål **1** til raske, enkle oppgaver.

Coated PTFE **2** for redusert avbrytelse av operasjon pga. opphopning av vev.

Isolert PTFE **3** for redusert risiko for utilsiktet vevsskade når man opererer på trange områder.

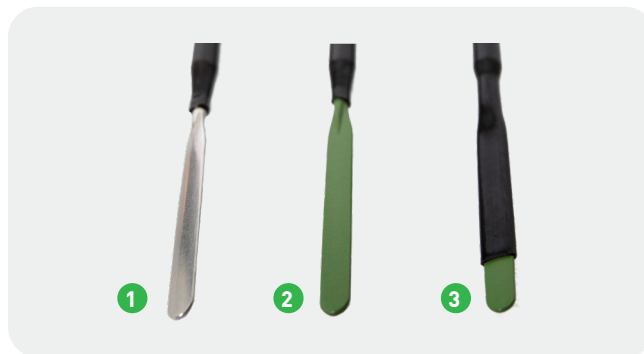

360° dreibart håndtak muliggjør bevegelsesfrihet og reduserer risikoen for tretthet i håndleddet

Universal 22 mm kobling som passer til alle røyksugmaskiner

Smal diameter sikrer presis kontroll og bedre visualisering, spesielt i trange områder

Praktisk 4 meter kabel

## Bestillingsinformasjon (enkeltpakket, steril)

| Ref. nr.  | Produktnavn og beskrivelse                         |
|-----------|--|
| 420100-00 | Diatermipenn med røykavsug, PTFE elektrode         |
| 420101-00 | Diatermipenn med røykavsug, PTFE isolert elektrode |
| 420102-00 | Diatermipenn med røykavsug, SS elektrode           |

Les mer på [molnlycke.no](https://molnlycke.no)

Mölnlycke Health Care AS, Postboks 6229, Etterstad, 0603 Oslo. Tlf: 22 70 63 70.  
Mölnlycke, BARRIER og ProcedurePak varemerke. navn og logo er registrert globalt til ett eller flere av selskapene i Mölnlycke Health Care gruppen. ©2024 Mölnlycke Health Care AB. Alle rettigheter forbeholdt. NOSU2502408

  
**Mölnlycke**<sup>®</sup>